



SmartJet „S“ Mehr Kraft mit 2. Feder

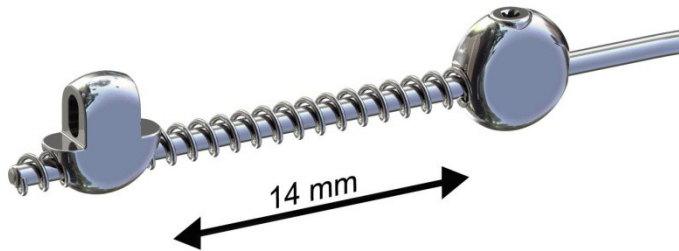


Federweg bei entspannter Feder
ca. 14 mm.

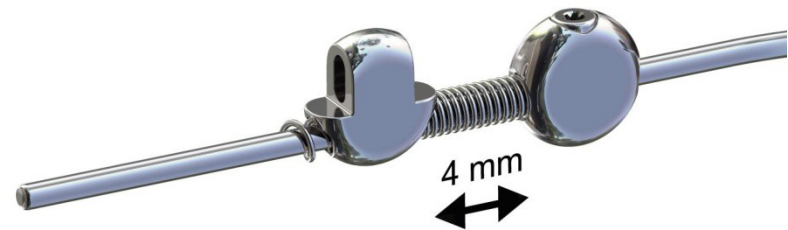


Bei komprimierter Feder entsteht ein
4 mm langes Federpaket.
Die maximale Ausdehnung der
Einzelfeder liegt bei etwa 10 mm.

Ein freies Federstück (14 mm lang) wird in die
1. Feder bis zum Anstehen am SmartStop eingedreht

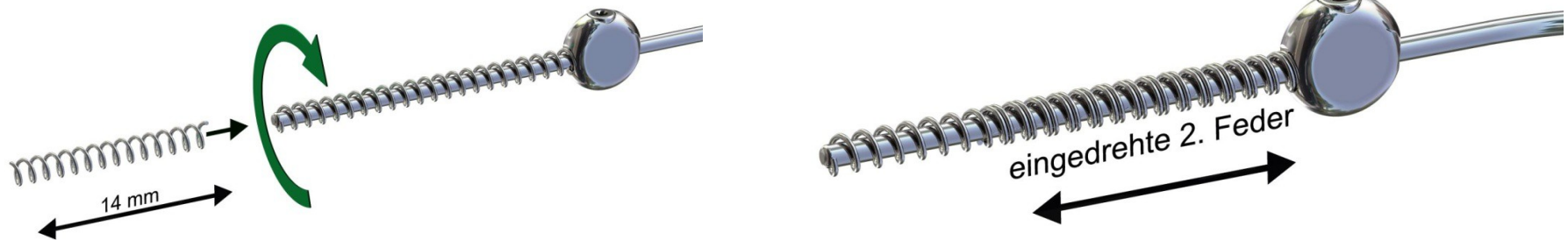

Die Zweite NiTi-Feder erhöht die Kraft sowohl für die Distalisation als auch für die Mesialisation deutlich.

Auch ein kürzere 2. Feder, erzielt diesen Effekt.

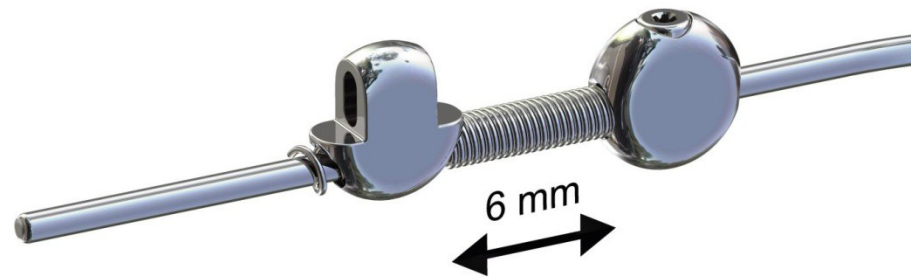

SmartJet „S“

Mehr Kraft mit 2. Feder

Bei komprimierter Doppelfeder entsteht ein 6 mm langes Federpaket.
Die maximale Ausdehnung der Doppelfeder liegt bei etwa 14 mm.